

LASAK dental

Katalog 2025

IMPLADENT®

An abstract graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping, flowing blue waves that create a sense of movement and depth. The waves are in various shades of blue, from light to a deeper cerulean.



Vážení zákazníci,

výroba dentálních implantátů a chirurgických nástrojů IMPLADENT® byla ukončena a nelze je objednat. Pro ošetření vašich pacientů s implantáty IMPLADENT® můžete nadále objednat základní sortiment protetických, otiskovacích a laboratorních komponent pro protetické řady 2.9, 3.7 a 5.0 a kompatibilních nástrojů.

Při nedostupnosti konkrétního produktu na hlavním skladu může být dodací lhůta i několik týdnů.

V případě, že v katalogu nenaleznete vámi požadované komponenty, které potřebujete pro ošetření pacienta, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo naše zákaznické oddělení na e-mailu objednavky@lasak.cz.

Přehled implantátů	4
Vhojovací válečky	7
Pilíře pro cementované náhrady STANDARD	8
Pilíře pro šroubované náhrady	9
Individuální řešení, CAD/CAM	10
Attachmenty LOCATOR	13
Kulové attachmenty	14
Otiskovací a laboratorní komponenty	15
Instrumentárium	16
Průvodce šroubováky a utahovacími momenty	17
Doplňky systému IMPLADENT®	18
Rejstřík katalogových čísel	19
Obchodní podmínky	23

Implantáty

Výroba implantátů IMPLADENT® byla ukončena a nelze je objednat. Následující stránky slouží jako přehled pro usnadnění identifikace implantátů, které je potřeba ošetřit novou protetickou náhradou. Nejprve je důležité určit, zda má implantát vnitřní osmihran, nebo ho nemá. Dále je třeba správně přiřadit příslušnou protetickou řadu. V rámci systému IMPLADENT® se v průběhu let vyráběly implantáty šesti průměrů v různých provedeních. K rozlišení protetických a laboratorních komponent slouží ale jen tři protetické řady.

Protetické řady



Červená protetická řada 2.9 je určena pro úzké implantáty IMPLADENT® D2.9.

Zelená protetická řada 3.7 je určena pro implantáty IMPLADENT® D3.7, D4.4, D5.1 a D5.6.

Modrá protetická řada 5.0 je určena pro implantáty IMPLADENT® D5.0.

Příslušnost protetických a laboratorních komponent k dané protetické řadě je v katalogu značena barevnými symboly.



Značení implantátů

Pokud má pacient pas implantátu, níže uvedená označení implantátu pomohou s identifikací protetické platformy. Jestliže pas implantátu není k dispozici, pomohou s identifikací dále uvedené typické RTG obrazy implantátů.



STI	Šroubové implantáty bez osmihranu
STIO	Šroubové implantáty s vnitřním osmihranem
SHA	Šroubové implantáty bez osmihranu
SHAO	Šroubové implantáty s vnitřním osmihranem
STI-BIO-C	Šroubové implantáty s vnitřním osmihranem
VHA	Válcové implantáty bez osmihranu
VHAO	Válcové implantáty s vnitřním osmihranem
ACCEL	Kónické šroubové implantáty s vnitřním osmihranem

Implantáty D3.7 a D3.6 vyrobené před rokem 1996 nemají vnitřní osmihran. Možnosti ošetření pacienta s těmito implantáty konzultujte se svým obchodním zástupcem nebo nás kontaktujte na e-mailu info@lasak.cz.

IMPLANTÁTY – STRAIGHT

Příklady rentgenových snímků

Implantáty řady 2.9

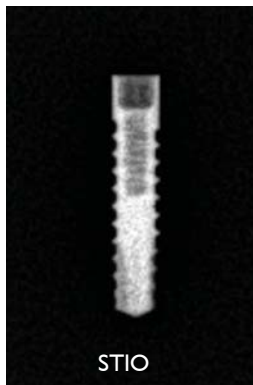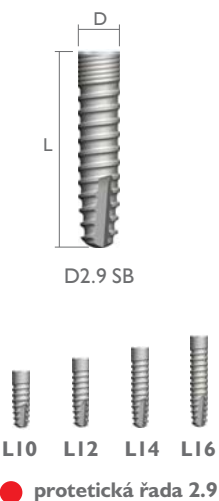

Implantát D2.9 s vnitřním osmihranem. Příslušná protetická řada 2.9 je v katalogu značena červeně.



Implantát D2.9 s pilířem pro šroubované náhrady s gingivální výškou L3.

IMPLANTÁTY – STRAIGHT

Příklady rentgenových snímků


Implantáty řady 3.7



● protetická řada 3.7



Implantáty D3.7, vyrobené před rokem 1996, bez vnitřního osmihranu mají vnitřní závit i v krčkové části.

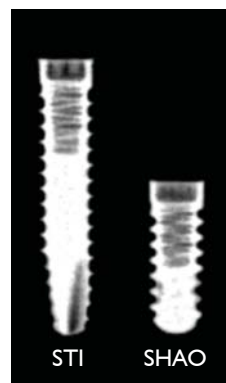

Neošetřené implantáty D3.7 s typickým projasněním v oblasti vnitřního osmihranu v krčkové části.



Implantáty D3.7 nesou kulový attachment L2 vlevo a L1 vpravo.


Implantáty řady 5.1



● protetická řada 3.7




Implantát D5.1 s pilířem nedosaženým do vnitřního osmihranu.

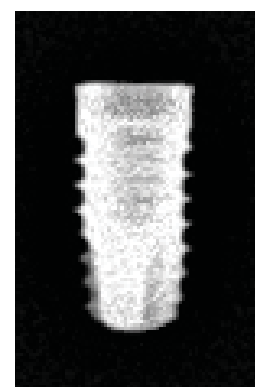

Typický obraz implantátu D5.1 po sejmutí protetické náhrady.

Implantáty řady 5.0

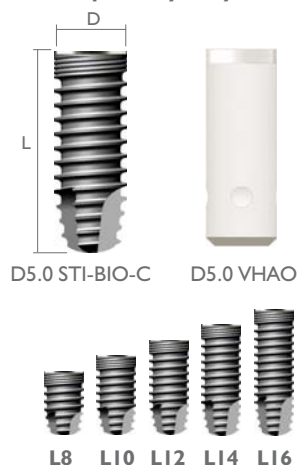


● protetická řada 5.0



Implantáty D5.0 nesou šroubovanou konstrukci systému Cresco s typickými fixačními šrouby s drážkou.



Implantát D5.0

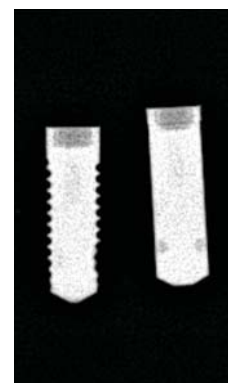


Šroubový a válcový implantát D5.0. Na proexponovanějším snímku by pod vnitřním osmihranem byla zřetelná i šachta se závitem pro fixační šroub.

IMPLANTÁTY ACCEL – TAPERED

Příklady rentgenových snímků

Implantáty řady 4.4

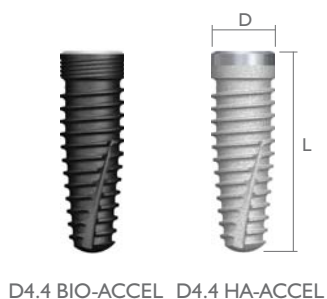


D4.4 BIO-ACCEL D4.4 HA-ACCEL




L8 L10 L12 L14 L16


● protetická řada 3.7

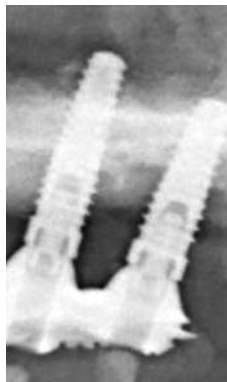

Implantáty D4.4 nesou šroubovanou konstrukci systému Cresco.

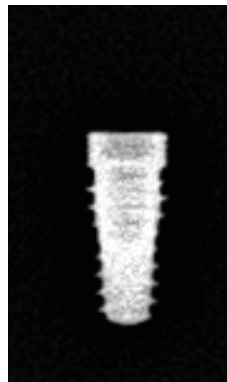


Neošetřený implantát D4.4 bez krycího šroubku.

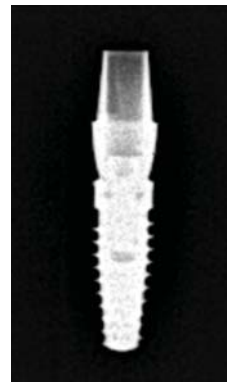

Implantát D4.4/L12 s pilířem pro cementovanou náhradu gingivální výšky L4.

Implantáty řady 5.6

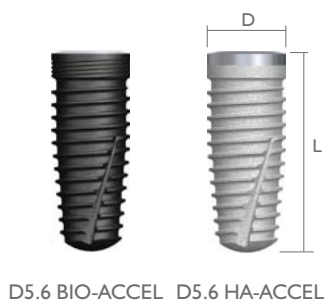


D5.6 BIO-ACCEL D5.6 HA-ACCEL




L8 L10 L12 L14 L16

● protetická řada 3.7

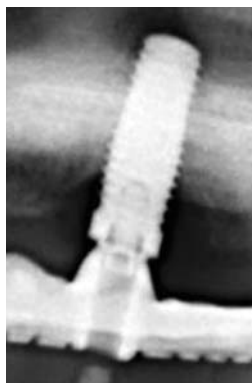


Implantát D5.6 nesoucí šroubovanou konstrukci systému Cresco.

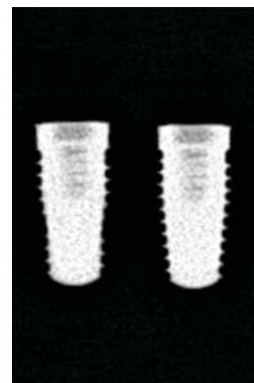


Implantáty D5.6 BIO a HA.

Identifikace šroubů

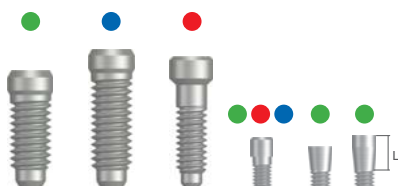


Šroub		Katalogové číslo	Celková délka
Šroub pro pilíře řady D3.7	●	552.3	6,7 mm
Šroub pro pilíře řady D5.0	●	652.3	7,8 mm
Šroub pro pilíře řady D2.9	●	752.3	7,3 mm
Šroub pro fixaci konstrukce	● ● ●	1641.3	4,7 mm
Šroub pro pilíř TS, L2	●	246.3	3,5 mm
Šroub pro pilíř TS, L3	●	346.3	4,3 mm

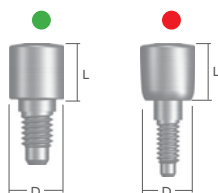


Vhojovací válečky – úzké

		L2	L4	L6	
D3.7/d4.0 úzký	●	222.3	422.3		778 Kč
D2.9/d3.9 úzký	●	1022.3	1222.3		778 Kč
D5.0 úzký	●	2122.3	2322.3	4022.3	677 Kč

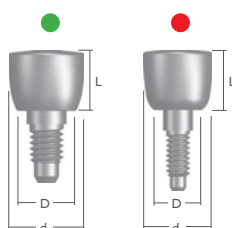

Vhojovací válečky estetické – široké

		L2	L4	
D3.7/d5.2 široký	●	622.3	822.3	778 Kč
D2.9/d4.7 široký	●	3122.3	3322.3	778 Kč

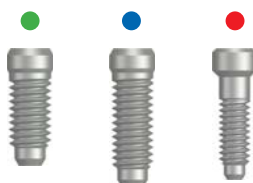

Šrouby

Šroub pro pilíře řady D3.7	●	552.3	342 Kč
Šroub pro pilíře řady D2.9	●	752.3	342 Kč
Šroub pro pilíře řady D5.0	●	652.3	342 Kč
Šroub pro fixaci konstrukce, M1.6/hex I.0	● ● ●	1641.3	342 Kč

Pro implantáty **IMPLADENT® D5.0** jsou určeny **pouze** protetické a laboratorní komponenty **modré protetické řady 5.0**. Nelze použít komponenty zelené protetické řady 3.7, které se používají pro implantáty **IMPLADENT® D5.1**.

V celém katalogu jsou použity zkratky D a d:


D – značí příslušnost k protetické řadě (červená 2.9, zelená 3.7, modrá 5.0)

d – značí skutečný rozměr označený kótou

Vhojovací váleček by měl přesahovat okraj adaptované měkké tkáně o 1 až 2 mm tak, aby během pooperačního období nebyl překryt edematózní sliznicí. Průměr vhojovacího válečku musí odpovídat průměru pilíře budoucí protetické náhrady.

Utahovací moment vhojovacích válečků je 5–10 Ncm – ručně šroubovákem.
Komponenty jsou dodávány v nesterilním balení.

Pilíře pro cementované náhrady STANDARD

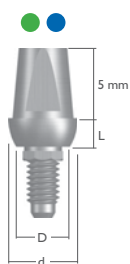


Pilíře pro cementované náhrady STANDARD – přímé

		L1	L2	L3	L4	
D3.7/d4.8 široký	●	1132.3	2132.3	3132.3	4132.3	2.150 Kč
D5.0 přímý	●	125.3	225.3	325.3	425.3	2.150 Kč

Pilíř je dodáván s fixačním šroubem.

Náhradní fixační šrouby pilířů je možné objednat pod kat. č. 552.3 pro zelenou protetickou řadu 3.7 a kat. č. 652.3 pro modrou protetickou řadu 5.0. Cena 342 Kč.

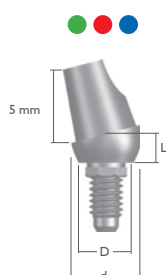


Pilíře pro cementované náhrady STANDARD – angulované

		L1	L2	L3	L4	
D3.7/d4.8/15° široký	●	1142.3	2142.3	3142.3	4142.3	2.150 Kč
D3.7/d4.8/25° široký	●	1152.3	2152.3	3152.3	4152.3	2.150 Kč
D2.9/d3.7/15° úzký	●	1102.3	2102.3	3102.3	4102.3	2.150 Kč
D2.9/d3.7/25° úzký	●	1112.3	2112.3	3112.3	4112.3	2.150 Kč
D5.0/15°	●	135.3	235.3	335.3	435.3	2.150 Kč
D5.0/25°	●	145.3	245.3	345.3	445.3	2.150 Kč

Pilíř je dodáván s fixačním šroubem.

Náhradní fixační šrouby pilířů je možné objednat pod kat. č. 552.3 pro zelenou protetickou řadu 3.7, kat. č. 752.3 pro červenou protetickou řadu 2.9 a kat. č. 652.3 pro modrou protetickou řadu 5.0. Cena 342 Kč.

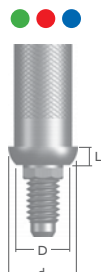

Pilíře pro provizorní práce

		L1	L3	
D3.7/d4.8 Ti	●	1055.3	1255.3	1.670 Kč
D3.7/d4.8 Ti bez 8hranu	●	1455.3	1655.3	1.670 Kč
D2.9/d3.7 Ti	●	0165.3	0365.3	1.670 Kč
D2.9/d3.7 Ti bez 8hranu	●	1165.3	1365.3	1.670 Kč
D5.0	●	2055.3		1.670 Kč

Pilíř je dodáván s fixačním šroubem.

Otiskovací a laboratorní komponenty

Otiskovací člen pro otevřenou metodu – rozšířený, D3.7/d4.8	●	533.3	1.167 Kč
Univerzální manipulační implantát s retencí – 3D tisk, D3.7	●	1830.00	698 Kč
Otiskovací člen pro otevřenou metodu – zúžený, D2.9/d3.7	●	933.3	1.167 Kč
Univerzální manipulační implantát s retencí – 3D tisk, D2.9	●	1829.00	698 Kč
Otiskovací člen pro otevřenou metodu – zúžený, D5.0	●	1123.3	1.167 Kč
Univerzální manipulační implantát s retencí – 3D tisk, D5.0	●	1833.00	698 Kč

Manipulační implantát – 3D tisk lze použít pro zhotovení modelu prostřednictvím 3D tiskárny i pro zhotovení konvenčního sádrového modelu.

Pilíř není vhodný pro ošetření sólo náhradou.


Pro upevnění finální náhrady použijte nový fixační šroub.

Utahovací moment fixačních šroubů pilířů je 35 Ncm.

Utahovací moment otiskovacích komponent je 5–10 Ncm – ručně šroubovákem.

Komponenty jsou dodávány v nesterilním balení.

vč. DPH

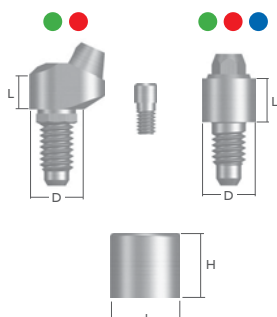


Pilíře pro šroubované náhrady

		L1	L2	L3	L4	
D3.7/d3.7 úzký	●	10042.3	11042.3	12042.3	13042.3	2.124 Kč
D2.9/d3.7 úzký	●	30042.3	31042.3	32042.3	33042.3	2.124 Kč
D3.7/25° angulovaný	●		230202	240202	250202	3.236 Kč
D2.9/25° angulovaný	●		130202	140202	150202	3.236 Kč
D5.0	●	155.3	255.3	355.3	455.3	2.124 Kč
Vhojovací kapna pilíře pro šroubované náhrady D3.7/d4.8/H4.5					2333.3	1.165 Kč
Šroub pro fixaci konstrukce, M1.6/hex I.0					1641.3	342 Kč

Pilíř je dodáván s fixačním šroubem a šroubem pro fixaci konstrukce.

Náhradní fixační šrouby pilířů je možné objednat pod kat. č. 552.3 pro zelenou protetickou řadu 3.7, kat. č. 752.3 pro červenou protetickou řadu 2.9 a kat. č. 652.3 pro modrou protetickou řadu 5.0. Cena 342 Kč.

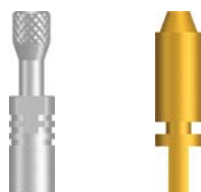

Otiskovací komponenty

Otiskovací kapna s pinem pro šroubované náhrady, D3.7 (D2.9)/H8	● ●	12033.3	1.165 Kč
Manipulační implantát pro šroubované náhrady – 3D tisk, D3.7/D2.9	● ●	1835.00	698 Kč
Otiskovací kapna s pinem pro šroubované náhrady, D5.0/H8	●	2133.3	1.165 Kč
Manipulační implantát pro šroubované náhrady, D5.0	●	1143.3	698 Kč

Transverzální šroubky

L2	●	246.3	527 Kč
L3	●	346.3	527 Kč

Délku hlavičky (L) fixačního šroubku volíme podle anatomické tloušťky korunky.

Kompatibilita šroubováků a zavaděčů

Komponenty	Nástroje	Katalogová čísla nástrojů
Přímé pilíře pro šroubované náhrady D3.7, D2.9	Zavaděč pilíře pro šroubované náhrady	7113.3, 70113.3
Přímé pilíře pro šroubované náhrady D5.0	Zavaděč pilíře pro šroubované náhrady**	4524.3
Angulované pilíře pro šroubované náhrady	Šroubovák hex I.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3* 8224.3
Šrouby pro fixaci konstrukce	Šroubovák hex I.0	44224.3*, 24024.3* 1417.11, 1417.21
Otiskovací kapny a členy	Šroubovák hex I.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3* 8224.3
Transverzální šroubky	Šroubovák hex I.0	44224.3*, 24024.3* 1417.11, 1417.21
Vhojovací válečky	Šroubovák hex I.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3* 8224.3

* Produkt již není v nabídce.

** Zavaděč pilíře pro šroubované náhrady D5.0 (kat. č. 4524.3) se prodává pod obchodním názvem explantační klíč.



Pilíř není vhodný pro ošetření sólo náhradou.

Utahovací moment fixačních šroubů pilířů je 35 Ncm.

Utahovací moment šroubů pro fixaci konstrukce a transverzálních šroubů pilířů je 15 Ncm.

Utahovací moment otiskovacích komponent je 5–10 Ncm – ručně šroubovákem.

Komponenty jsou dodávány v nesterilním balení.

vč. DPH



BioCam® šroubované mosty na implantáty

	Mezičlen mostu (cena/člen)	Člen nesený implantátem (cena/člen)
Ti, CoCr	D01 – 606 Kč	D02 – 2.455 Kč
ZrO ₂	D07 – 726 Kč	D08 – 2.691 Kč
SCAN/CAD	D10 – 318 Kč/člen	

V ceně jsou zahrnuty fixační šrouby, u ZrO₂ konstrukce také vlepované báze. Ceny platí při dodání STL dat.



BioCam® individuální abutmenty

Ti, CoCr	D03	2.455 Kč/ks
ZrO ₂	D04	2.691 Kč/ks
SCAN/CAD	D10	318 Kč/člen

V ceně je zahrnut fixační šroub, u ZrO₂ abutmentu také vlepovaná báze. Ceny platí při dodání STL dat.



BioCam® třmeny (CEKA PRECI-HORIX / DOLDER – U, EGG / PrimeLOC) – Ti, CoCr

	STL	PRECISION
Třmen nesený 2 implantáty BAR 2	D11 – 7.000 Kč	D14 – 8.272 Kč
Třmen nesený 3 implantáty BAR 3	D12 – 10.500 Kč	D15 – 12.726 Kč
Třmen nesený 4 a více implantáty BAR 4	D13 – 13.500 Kč	D16 – 16.362 Kč
PrimeLOC attachment pro třmeny, M2.0, sada 2 ks	A0102.S.P	2.743 Kč

V ceně konstrukce jsou zahrnuty fixační šrouby. STL – zhotovení konstrukce ze zaslaných elektronických dat. PRECISION – zhotovení konstrukce na základě zaslaného sádrového modelu.



Pilíře BioCam® LASAK IMPLADENT®

IMPLADENT D3.7, bez 8hranu	●	1107.00	1.394 Kč
IMPLADENT D3.7, s 8hranem	●	1128.00	1.394 Kč
IMPLADENT D2.9, bez 8hranu	●	1108.00	1.394 Kč
IMPLADENT D2.9, s 8hranem	●	1131.00	1.394 Kč

Pilíř je dodáván s fixačním šroubem.



Skenovací tělíska

IMPLADENT D3.7, s 8hranem	●	1801.00	950 Kč
IMPLADENT D2.9, s 8hranem	●	1802.00	950 Kč
IMPLADENT D5.0, s 8hranem	●	1834.00	950 Kč
IMPLADENT pro šroubované náhrady, D3.7/D2.9	● ● ●	1836.00	950 Kč

Skenovací tělíska IMPLADENT byla vyvinuta pro skenování laboratorním skenerem na sádrovém modelu. Tělíska svojí konstrukcí a rozměry nejsou vhodná pro intraorální skenování.



Pilíř Cast-On LASAK IMPLADENT®

IMPLADENT D3.7, s 8hranem	●	1161.00	1.842 Kč
---------------------------	---	---------	----------

Pilíř je dodáván s fixačním šroubem.

Pilíř není vhodný pro ošetření sólo náhradou.

Utahovací moment skenovacích tělísek je 5–10 Ncm – ručně šroubovákem.

Utahovací moment fixačních šroubů je 35 Ncm. Utahovací moment pilířů BioCam® je 35 Ncm.

Dodací doba malých BioCam® konstrukcí je 3–5 pracovních dnů a velkých BioCam® konstrukcí 5–7 pracovních dnů. Pro více informací si vyžádejte ceník a leták BioCam®.

Komponenty jsou dodávány v nesterilním balení.

Možnosti zhotovení frézovaných konstrukcí

Na implantologický systém LASAK IMPLADENT® můžete konstrukce navrhovat na vlastním skeneru pomocí originální CAD knihovny LASAK a skenovacích tělísek LASAK. Konstrukce zhotovujeme z dodaných STL dat nebo z dodaného sádrového modelu.

Typ konstrukce	Implantační systém a protetická platforma	Tvar šachty		Podporované typy spojení pro angulaci	Skenovací tělísko – kat. č.	Zvláštní podmínky a dodací lhůta, za kterých je realizace objednávky možná
		Přímá	Angulovaná < 15° s originálním šroubem			
Frézované konstrukce s integrálním dosedem	IMPLADENT D2.9	✓	✓	I, B	1802.00	Příplatek za angulaci 600 Kč/člen + 3 dny navíc podle rozsahu konstrukce
	IMPLADENT D3.7	✓	✓	I, B	1801.00	
	IMPLADENT D5.0	✓	✓	I, B	1834.00	Příplatek za angulaci 600 Kč/člen + 3 dny navíc podle rozsahu konstrukce
	IMPLADENT pilíře pro šroubované náhrady D3.7/D2.9	✓	✗	✗	1836.00	

I – Indexed, komponenty s osmihranem

B – Bridge, komponenty bez osmihranu

Typ konstrukce	Implantační systém a protetická platforma	Tvar šachty		Skenovací tělísko – kat. č.	Zvláštní podmínky a dodací lhůta, za kterých je realizace objednávky možná
		Přímá	Angulovaná < 25° se speciálním šroubem		
Frézované konstrukce na pilíře BioCam	IMPLADENT D2.9	✓	✗	1802.00	_____
	IMPLADENT D3.7	✓	✗	1801.00	_____

Pro redesign dosedů je třeba zaslat STL data (pracovní model s konstrukcí a dásen) na e-mail cadcam@lasak.cz a sádrový pracovní model poštou do společnosti LASAK.



Moderní implantologický systém pro ošetření vašich budoucích pacientů




záruka
dostupnosti
20 LET
protetických
komponent

Implantáty pro každou situaci

BioniQ® je komplexní implantologický systém pro ošetření všech situací. Obsahuje implantáty BioniQ®, zaváděné na úroveň kosti, a implantáty BioniQ® Plus, umožňující zavádění na úroveň měkkých tkání. V obou případech již od průměru 2,9 mm. Všechny implantáty jsou opatřeny unikátním hydrofilním BIO povrchem.

- Široká nabídka protetických komponent
- Integrovaný platform shift pro vysoký objem a stabilitu tkání
- Hydrofilní, osteokonduktivní BIO povrch
- Jedno instrumentarium pro ošetření všemi implantáty

Attachmenty LOCATOR

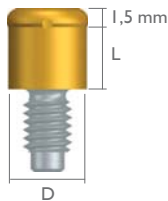

Průměr attachmentu LOCATOR je 3,85 mm. Attachment volíme tak vysoký, aby přesahoval alespoň o 1,5 mm okraj sliznice.

vč. DPH

Attachmenty

	L0	L1	L2	L3	L4	L5	
D3.7	● 01207	01208	01209	01210	01211	01212	2.800 Kč

Protetická sada PrimeLOC



Protetická sada Standard (růžově anodizované kovové pouzdro insertu, černý procesní insert, modrý, růžový a čirý insert – Standard, vykrývací kroužek) á 2 ks

A0055.S.ZTA.P 1.402 Kč

Inserty PrimeLOC – Standard



Modrý, 700 g, sada 4 ks	A0002.SZ.P	518 Kč
Růžový, 1 200 g, sada 4 ks	A0003.SZ.P	518 Kč
Čirý, 2 200g, sada 4 ks	A0004.SZ.P	518 Kč
Červený, 600 g, rozšířené rozpětí, sada 4 ks	A0005.SZ.P	518 Kč
Oranžový, 1 000 g, rozšířené rozpětí, sada 4 ks	A0006.SZ.P	518 Kč
Zelený, 1 900 g, rozšířené rozpětí, sada 4 ks	A0007.SZ.P	518 Kč

Pro divergentní implantáty (10°–20°) použijte inserty PrimeLOC s rozšířeným rozpětím.

Nástroje



Šroubovák do ráčny LOCATOR	08913	1.143 Kč
Zaváděcí nástroj PrimeLOC	A0019.P	1.981 Kč

Otiskovací a laboratorní komponenty



Otiskovací kapna PrimeLOC, vč. černého procesního insertu, sada á 4 ks	A0015.SZ.P	1.615 Kč
Manipulační implantát PrimeLOC – přímý, sada 4 ks	A0014.SZ.P	1.615 Kč
Otiskovací vložka, sada 4 ks	A0012.SZ.P	731 Kč

Utahovací moment attachmentů je 35 Ncm.

Protetické, otiskovací a laboratorní komponenty a nástroje PrimeLOC jsou plnohodnotně použitelné s attachmenty LOCATOR.

Komponenty a nástroje jsou dodávány v nesterilním balení.

Kulové attachmenty



vč. DPH

Kulové attachmenty CLASSIC

		L1	L2	L3	L4	L6	
D3.7/d3.7	●	21432:3	22432:3	23432:3	24432:3	26432:3	1.862 Kč
D2.9/d3.7	●	55432:3	56432:3	57432:3	58432:3	60432:3	1.862 Kč
D5.0	●	41432:3	42432:3	43432:3	44432:3		1.862 Kč



Matrice CLASSIC

Matrice CLASSIC	6932.3	1.555 Kč
Matrice CLASSIC eliptická	7932.3	1.555 Kč



Matrice CLASSIC Plus

Matrice CLASSIC Plus	055752	2.378 Kč
Matrice CLASSIC Plus eliptická	055890	2.512 Kč



Nástroje

Aktivátor matrice CLASSIC	8932.3	1.199 Kč
Deaktivátor matrice CLASSIC	9932.3	972 Kč



Šroubovák CLASSIC Plus	072609	684 Kč
------------------------	--------	--------



Zavaděč


Unigrip, hex 2.5/ISO/L16	2459.00	2.057 Kč
--------------------------	---------	----------



Otiskovací držič místa CLASSIC	● ● ●	543:3	263 Kč
--------------------------------	-------	-------	--------

U kulových attachmentů volíme výšku slizniční části (L) v úrovni sliznice nebo 1 mm nad okrajem sliznice. Vždy je nutno zohlednit dostatečný prostor v těle snímatelné náhrady pro zapolymerování matrice a její namáhání v okluzi.

Utahovací moment attachmentů je 35 Ncm.
Komponenty a nástroje jsou dodávány v nesterilním balení.

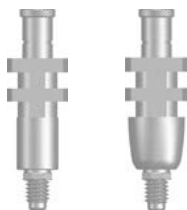

Otiskovací členy pro otevřenou metodu otiskování

D3.7/d3.7 úzký	●	633.3	1.167 Kč
D3.7/d4.8 široký	●	533.3	1.167 Kč
D2.9/d3.7 úzký	●	933.3	1.167 Kč
D2.9/d4.5 široký	●	1233.3	1.167 Kč
D5.0	●	1123.3	1.167 Kč

Otiskovací členy se utahují šroubovákem hex I.4.



Otiskovací kapky s pinem pro šroubované náhrady

D3.7 (D2.9)/H8	● ●	12033.3	1.165 Kč
D5.0/H8	●	2133.3	1.165 Kč

Otiskovací kapky se utahují šroubovákem hex I.4.



Univerzální manipulační implantáty (laboratorní implantáty)

s retencí – 3D tisk, D3.7	●	1830.00	698 Kč
s retencí – 3D tisk, D2.9	●	1829.00	698 Kč
s retencí – 3D tisk, D5.0	●	1833.00	698 Kč

Náhradní fixační šrouby pilířů je možné objednat pod kat. č. 552.3 pro zelenou protetickou řadu 3.7, kat. č. 752.3 pro červenou protetickou řadu 2.9 a kat. č. 652.3 pro modrou protetickou řadu 5.0. Cena 342 Kč.

Manipulační implantát – 3D tisk lze použít pro zhotovení modelu prostřednictvím 3D tiskárny i pro zhotovení konvenčního sádrového modelu.



Manipulační implantáty pro šroubované náhrady

s retencí – 3D tisk, D3.7/D2.9	● ●	1835.00	698 Kč
s retencí D5.0	●	1143.3	698 Kč



Spalitelné kapky pro cementované náhrady – pilíře STANDARD

se schůdkem D3.7 (D2.9) úzká	● ●	553.3	217 Kč
se schůdkem D5.0	●	653.3	217 Kč



Spalitelné kapky pro šroubované náhrady

D3.7 (D2.9)	● ●	1153.3	247 Kč
D5.0	●	2253.3	247 Kč



Pro implantáty IMPLADENT® D5.0 jsou určené **pouze** protetické a laboratorní komponenty **modré protetické řady 5.0**. Nelze použít komponenty zelené protetické řady 3.7, které se používají pro implantáty IMPLADENT® D5.1.

Utahovací moment otiskovacích komponent je 5–10 Ncm – ručně šroubovákem.
Komponenty jsou dodávány v nesterilním balení.

Ráčna

Ráčna s momentovým adaptérem se používá v chirurgické i protetické fázi ošetření. Mechanismus ráčny umožňuje pohodlnou změnu pracovního chodu, aniž by bylo třeba ráčnu sejmut z pracovního nástroje. Aby bylo možné použít níže uvedené šroubováky, zavaděče a explantační klíč s ráčnou (kat. č. 2408.00), je nutné použít jako adaptér do ráčny univerzální zavaděč Unigrip (kat. č. 2459.00).

vč. DPH



Ráčna

Ráčna	2408.00	6.570 Kč
-------	---------	----------



Zavaděč – adaptér pro ráčnu

Unigrip, hex 2.5/ISO/L16	2459.00	2.057 Kč
--------------------------	---------	----------


Unigrip umožňuje použití šroubováků, zavaděčů a explantačního klíče s ráčnou (kat. č. 2408.00).
Unigrip umožňuje zavádění kulových attachmentů.



Šroubováky

Šroubovák imbus mechanický hex 1.4	8224.3	524 Kč
Šroubovák – krátký, hex 1.0/ISO/L11	1417.11	524 Kč
Šroubovák – dlouhý, hex 1.0/ISO/L21	1417.21	524 Kč

Pro použití šroubováků s ráčnou (kat. č. 2408.00) je nutné použít jako adaptér pro ráčnu zavaděč Unigrip (kat. č. 2459.00).

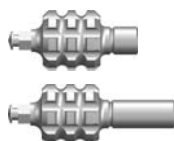

Zavaděče pilíře pro šroubované náhrady

krátký D2.9/D3.7/L5/L17 (hex2.0)	● ●	7113.3	1.678 Kč
dlouhý D2.9/D3.7/L10/L22 (hex2.0)	● ●	70113.3	1.678 Kč

Pro použití zavaděčů s ráčnou (kat. č. 2408.00) je nutné použít jako adaptér pro ráčnu univerzální zavaděč Unigrip (kat. č. 2459.00).



Explantační klíč – zavaděč pilíře pro šroubované náhrady

Explantační klíč hex3.5/L10/L22	●	4524.3	1.678 Kč
---------------------------------	---	--------	----------

Pro použití nástroje s ráčnou (kat. č. 2408.00) je nutné použít jako adaptér pro ráčnu univerzální zavaděč Unigrip (kat. č. 2459.00).


Používá se také pro zavádění pilířů pro šroubované náhrady D5.0 (kat. č. X55.3).

Nástroje jsou dodávány v nesterilním balení.

Průvodce šroubovými a utahovacími momenty

Šroubováky

Implantologický systém IMPLADENT® používá dvě hlavní skupiny upevňovacích šroubů – fixační šrouby pilířů a šrouby pro fixaci konstrukce. K dotažení fixačních šroubů (stejně jako krycích šroubků implantátu, vhojovacích válečků a dalších komponent) používá systém IMPLADENT® šroubovák **hex 1.4**. Na šrouby pro fixaci konstrukce do pilířů pro šroubované náhrady používá systém IMPLADENT® šroubovák **hex 1.0**.

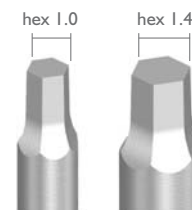

vč. DPH



Šroubováky

Šroubovák imbus mechanický hex 1.4/L9	8224.3	524 Kč
Šroubovák – krátký, hex 1.0/ISO/L1 I	1417.11	524 Kč
Šroubovák – dlouhý, hex 1.0/ISO/L2 I	1417.21	524 Kč

Pro použití šroubováků s ráčnou (kat. č. 2408.00) je nutné použít jako adaptér pro ráčnu univerzální zavaděč Unigrip (kat. č. 2459.00).

Celková délka šroubováku hex 1.4 je 24 mm. Celková délka šroubováku hex 1.0 v krátké verzi je 25 mm a v dlouhé verzi je 35 mm.

Zavaděč – adaptér pro ráčnu

Unigrip, hex 2.5/ISO/L16	2459.00	2.057 Kč
--------------------------	---------	----------

Unigrip umožňuje použití šroubováků, zavaděčů a explantačního klíče s ráčnou (kat. č. 2408.00).
Unigrip umožňuje zavádění kulových attachmentů.

Pro zajištění spolehlivého utěsnění rozhraní implantátu a pilíře a zamezení povolení šroubu je nezbytné jeho utažení ráčnou. Utahovací moment fixačních šroubů pilířů je 35 Ncm. Pro upevnění finální náhrady použijte nový fixační šroub. Pro dotažování šroubů pro fixaci konstrukce a dalších komponent se používají jiné utahovací momenty – viz dále.



Ráčna

Ráčna	2408.00	6.570 Kč
-------	---------	----------

Pro použití šroubováků s ráčnou (kat. č. 2408.00) je nutné použít jako adaptér pro ráčnu univerzální zavaděč Unigrip (kat. č. 2459.00).

Přehled utahovacích momentů

Komponenty	Nástroje	Katalogová čísla nástrojů	Utahovací momenty
Fixační šrouby pilířů	Šroubovák hex 1.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3*, 8224.3	35 Ncm
Pilíře pro provizorní práce PEEK	Šroubovák hex 1.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3*, 8224.3	20 Ncm
Vhojovací válečky	Šroubovák hex 1.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3*, 8224.3	5–10 Ncm**
Otiskovací a laboratorní komponenty	Šroubovák hex 1.4	24224.3*, 4224.3*, 4024.3*, 8224.3	5–10 Ncm**
Šrouby pro fixaci konstrukce a TS šroubky	Šroubovák hex 1.0	44224.3*, 24024.3*, 1417.11, 1417.21	15 Ncm
Kulové attachmenty	Unigrip	2459.00	35 Ncm
Attachmenty LOCATOR	Šroubovák LOCATOR	09999*, 08913	35 Ncm
Attachmenty Titanmagnetics	Zavaděč	H.00.04.X2*, H.00.04.K2*	20 Ncm

* Produkt již není v nabídce.

** Jemné utažení rukou pomocí šroubováku.

Šroubováky s ISO zámkem

Šroubováky IMPLADENT® se do adaptérů upevňují pomocí tzv. ISO zámků. Jedná se o standardizované ISO spojení pro chirurgické nástroje, které používají také některé jiné implantologické systémy.





Pro upevnění finální náhrady je vhodné použít vždy nový fixační šroub.
Nástroje jsou dodávány v nesterilním balení.



Explantační frézy

D2.9	1000.3	2.683 Kč
D3.7	1010.3	2.683 Kč
D5.1	1020.3	2.683 Kč

Pro práci s frézou je třeba užít zpětný chod.

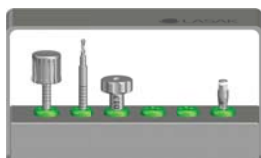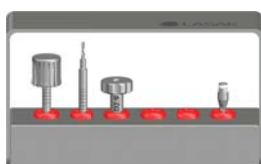

Sady na odvrtání šroubu

Sada na odvrtání šroubu IMPLADENT, D2.9 (závitník, levotočivý vrták, naváděcí pouzdro, dvoubřit a organizér)	1903.00	8.133 Kč
Závitník, D2.9	2909.01	2.400 Kč
Levotočivý vrták, D2.9	2909.02	2.000 Kč
Naváděcí pouzdro, D2.9	1903.03	1.010 Kč
Dvoubřit, D2.9	2909.04	2.000 Kč
Sada na odvrtání šroubu IMPLADENT, D3.7 (závitník, levotočivý vrták, naváděcí pouzdro, dvoubřit a organizér)	1904.00	8.133 Kč
Závitník, D3.7	1904.01	3.120 Kč
Levotočivý vrták, D3.7	2909.02	2.000 Kč
Naváděcí pouzdro, D3.7	1904.03	1.010 Kč
Dvoubřit, D3.7	1904.04	2.600 Kč

Návod na použití sady na odvrtání šroubu je k dispozici na www.lasak.cz

Kat.č.	Název	Specifikace	Strana
543:3	Otiskovací držič místa CLASSIC	r2.25	14
01207	Locator pilíř IMPLADENT	D3.7/L0	13
01208	Locator pilíř IMPLADENT	D3.7/L1	13
01209	Locator pilíř IMPLADENT	D3.7/L2	13
01210	Locator pilíř IMPLADENT	D3.7/L3	13
01211	Locator pilíř IMPLADENT	D3.7/L4	13
01212	Locator pilíř IMPLADENT	D3.7/L5	13
08913	Šroubovák – LOCATOR	ISO	13
055752	Matrice CLASSIC Plus	055752	14
055890	Matrice CLASSIC Plus - eliptická	055890	14
072609	Šroubovák CLASSIC Plus	072609	14
130202	Pilíř pro šroubované náhrady – angulovaný	D2.9/25°/L2	9
140202	Pilíř pro šroubované náhrady – angulovaný	D2.9/25°/L3	9
150202	Pilíř pro šroubované náhrady – angulovaný	D2.9/25°/L4	9
230202	Pilíř pro šroubované náhrady – angulovaný	D3.7/25°/L2	9
240202	Pilíř pro šroubované náhrady – angulovaný	D3.7/25°/L3	9
250202	Pilíř pro šroubované náhrady – angulovaný	D3.7/25°/L4	9
0165.3	Pilíř pro provizorní práce	D2.9/d3.7/L1	8
1000.3	Explantační fréza	D2.9	18
10042.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D3.7/L1	9
1010.3	Explantační fréza	D3.7	18
1020.3	Explantační fréza	D5.1	18
1022.3	Vhojovací váleček – zúžený	D2.9/d3.9/L2	7
1055.3	Pilíř pro provizorní práce	D3.7/d4.8/L1	8
1102.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D2.9/d3.7/15°/L1	8
11042.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D3.7/L2	9
1107.00	Pilíř BioCam, IMPLADENT, bez osmihranu	D3.7/NI	10
1108.00	Pilíř BioCam, IMPLADENT, bez osmihranu	D2.9/NI	10
1112.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D2.9/d3.7/25°/L1	8
1123.3	Otiskovací člen pro otevřenou metodu – zúžený	D5.0	8, 15
1128.00	Pilíř BioCam, IMPLADENT, s osmihranem	D3.7	10
1131.00	Pilíř BioCam, IMPLADENT, s osmihranem	D2.9	10
1132.3	Pilíř STANDARD – přímý	D3.7/d4.8/L1	8
1142.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D3.7/d4.8/15°/L1	8
1143.3	Manipulační implantát pro šroubované náhrady	D5.0	9, 15
1152.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D3.7/d4.8/25°/L1	8
1153.3	Spalitelná kapna pro šroubované náhrady	D3.7/d3.7	15
1161.00	Pilíř Cast-On, IMPLADENT, s osmihranem	D3.7	10
12033.3	Otiskovací kapna pro šroubované náhrady	D3.7/H8	9, 15
12042.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D3.7/L3	9
1222.3	Vhojovací váleček – zúžený	D2.9/d3.9/L4	7
1233.3	Otiskovací člen pro otevřenou metodu – rozšířený	D2.9/d4.5	15
125.3	Pilíř STANDARD – přímý	D5.0/L1	8
1255.3	Pilíř pro provizorní práce	D3.7/d4.8/L3	8
13042.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D3.7/L4	9
135.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D5.0/15°/L1	8
1365.3	Pilíř pro provizorní práce bez 8 hranu	D2.9/d3.7/L3	8
1417.11	Šroubovák – krátký	hex1.0/ISO/L11	16, 17
1417.21	Šroubovák – dlouhý	hex1.0/ISO/L21	16, 17
145.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D5.0/25°/L1	8
1455.3	Pilíř pro provizorní práce bez 8 hranu	D3.7/d4.8/L1	8

Rejstřík katalogových čísel

Kat.č.	Název	Specifikace	Strana
155.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D5.0/L1	9
1641.3	Šroub pro fixaci konstrukce	M1.6/hex I.0	6, 7, 9
1655.3	Pilíř pro provizorní práce bez 8 hranu	D3.7/d4.8/L3	8
1801.00	Skenovací tělísko, IMPLADENT, s osmihranem	D3.7	10
1802.00	Skenovací tělísko, IMPLADENT, s osmihranem	D2.9	10
1829.00	Univerzální manipulační implantát s retencí – 3D tisk	D2.9	8, 15
1830.00	Univerzální manipulační implantát s retencí – 3D tisk	D3.7	8, 15
1833.00	Univerzální manipulační implantát s retencí – 3D tisk	D5.0	8, 15
1834.00	Skenovací tělísko, IMPLADENT, s osmihranem	D5.0	10
1835.00	Manipulační implantát pro šroubované náhrady – 3D tisk	D3.7/D2.9	9, 15
1836.00	Skenovací tělísko, IMPLADENT, pro šroubované náhrady	D3.7/D2.9	10
1903.00	Sada na odvrtání šroubu IMPLADENT	D2.9	18
1903.03	Sada na odvrtání šroubu IMPLADENT – naváděcí pouzdro	D2.9	18
1904.01	Sada na odvrtání šroubu IMPLADENT – závitník	D3.7/M2.3	18
1904.03	Sada na odvrtání šroubu IMPLADENT – naváděcí pouzdro	D3.7	18
1904.04	Sada na odvrtání šroubu IMPLADENT – dvoubřit	D3.7/d2.5	18
2055.3	Pilíř pro provizorní práce	D5.0/L1	8
2102.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D2.9/d3.7/15°/L2	8
2112.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D2.9/d3.7/25°/L2	8
2122.3	Vhojovací váleček - zúžený	D5.0/L2	7
2132.3	Pilíř STANDARD – přímý	D3.7/d4.8/L2	8
2133.3	Otiskovací kapna pro šroubované náhrady	D5.0/H8	9, 15
2142.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D3.7/d4.8/15°/L2	8
21432:3	Attachment kulový CLASSIC	D3.7/L1	14
2152.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D3.7/d4.8/25°/L2	8
222.3	Vhojovací váleček – zúžený	D3.7/d4.0/L2	7
22432:3	Attachment kulový CLASSIC	D3.7/L2	14
225.3	Pilíř STANDARD – přímý	D5.0/L2	8
2253.3	Spalitelná kapna pro šroubované náhrady	D5.0	15
2322.3	Vhojovací váleček – zúžený	D5.0/L4	7
2333.3	Vhojovací kapna pilíře pro šroubované náhrady	D3.7/d4.8/H4.5	9
23432:3	Attachment kulový CLASSIC	D3.7/L3	14
235.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D5.0/15°/L2	8
2408.00	Ráčna BioniQ		16, 17
24432:3	Attachment kulový CLASSIC	D3.7/L4	14
245.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D5.0/25°/L2	8
2459.00	Unigrip BioniQ	hex2.5/ISO/L5/L16	14, 16, 17
246.3	Šroub pro pilíř TS	L2	6, 9
255.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D5.0/L2	9
26432:3	Attachment kulový CLASSIC	D3.7/L6	14
2909.01	Sada na odvrtání šroubu – závitník	QR/D2.9/M1.6	18
2909.02	Sada na odvrtání šroubu – levotočivý vrták	QR/D2.9/D3.7/d1.2	18
2909.04	Sada na odvrtání šroubu – dvoubřit	QR/D2.9/d1.7	18
30042.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D2.9/d3.7/L1	9
3102.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D2.9/d3.7/15°/L3	8
31042.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D2.9/d3.7/L2	9
3112.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D2.9/d3.7/25°/L3	8
3122.3	Vhojovací váleček estetický – rozšířený	D2.9/d4.7/L2	7
3132.3	Pilíř STANDARD – přímý	D3.7/d4.8/L3	8
3142.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D3.7/d4.8/15°/L3	8
3152.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D3.7/d4.8/25°/L3	8

Kat.č.	Název	Specifikace	Strana
32042.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D2.9/d3.7/L3	9
325.3	Pilíř STANDARD – přímý	D5.0/L3	8
33042.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D2.9/d3.7/L4	9
3322.3	Vhojovací váleček estetický – rozšířený	D2.9/d4.7/L4	7
335.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D5.0/15°/L3	8
345.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D5.0/25°/L3	8
346.3	Šroub pro pilíř TS	L3	6, 9
355.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D5.0/L3	9
4022.3	Vhojovací váleček – zúžený	D5.0/L6	7
4102.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D2.9/d3.7/15°/L4	8
4112.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D2.9/d3.7/25°/L4	8
4132.3	Pilíř STANDARD – přímý	D3.7/d4.8/L4	8
4142.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D3.7/d4.8/15°/L4	8
4152.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D3.7/d4.8/25°/L4	8
422.3	Vhojovací váleček – zúžený	D3.7/d4.0/L4	7
425.3	Pilíř STANDARD – přímý	D5.0/L4	8
435.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D5.0/15°/L4	8
445.3	Pilíř STANDARD – angulovaný	D5.0/25°/L4	8
4524.3	Explantační klíč	D5.0/L10/L22	16
455.3	Pilíř pro šroubované náhrady	D5.0/L4	9
533.3	Otiskovací člen pro otevřenou metodu – rozšířený	D3.7/d4.8	8, 15
552.3	Šroub pro pilíře řady D3.7	M2.3/L67	6, 7
553.3	Spalitelná kapna se schůdkem pro cem.náhrady (STANDARD)	D3.7/d4.8	15
622.3	Vhojovací váleček estetický – rozšířený	D3.7/d5.2/L2	7
633.3	Otiskovací člen pro otevřenou metodu – zúžený	D3.7	15
652.3	Šroub pro pilíře řady D5.0	M2.3/L78	6, 7
653.3	Spalitelná kapna se schůdkem pro cem.náhrady (STANDARD)	D5.0	15
6932.3	Matrice CLASSIC	055698	14
70113.3	Zavaděč pilíře pro šroubované náhrady – dlouhý	D2.9/D3.7/L11/L22	16
7113.3	Zavaděč pilíře pro šroubované náhrady – krátký	D2.9/D3.7/L5/L17	16
752.3	Šroub pro pilíře řady D2.9	M1.6/90°/L73	6, 7
7932.3	Matrice CLASSIC - eliptická	055887	14
822.3	Vhojovací váleček estetický – rozšířený	D3.7/d5.2/L4	7
8224.3	Šroubovák imbus mechanický	hex1.4	16, 17
8932.3	Aktivátor matrice CLASSIC	070197	14
933.3	Otiskovací člen pro otevřenou metodu – zúžený	D2.9/d3.7	8, 15
9932.3	Deaktivátor matrice CLASSIC	070199	14
A0002.SZ.P	Inserty PrimeLOC, duální retence – Standard, modrý, 700 g, sada 4 ks	700 g	13
A0003.SZ.P	Inserty PrimeLOC, duální retence – Standard, růžový 1200 g, sada 4 ks	1200 g	13
A0004.SZ.P	Inserty PrimeLOC, duální retence – Standard, čirý 2200 g, sada 4 ks	2200 g	13
A0005.SZ.P	Inserty PrimeLOC, rozšířené rozpětí – Standard, červený, 600 g, sada 4 ks	600 g	13
A0006.SZ.P	Inserty PrimeLOC, rozšířené rozpětí – Standard, oranžový, 1000 g, sada 4 ks	1000 g	13
A0007.SZ.P	Inserty PrimeLOC, rozšířené rozpětí – Standard, zelený, 1900 g, sada 4 ks	1900 g	13
A0012.SZ.P	Otiskovací vložka PrimeLOC, sada 4 ks		13
A0014.SZ.P	Manipulační implantát PrimeLOC – přímý, sada 4 ks		13
A0015.SZ.P	Otiskovací kapna PrimeLOC, vč. černého procesního insertu, sada 4 ks		13
A0019.P	Zavaděcí nástroj PrimeLOC, dvoudílný		13
A0055.S.ZTA.P	Protetická sada PrimeLOC Standard, sada 2 ks		13
D01	Mezičlen šroubovaného mostu nad dva implantáty, kov		10
D02	Člen nesený implantátem, kov		10
D03	Individuální pilíř BioCam, kov		10

Rejstřík katalogových čísel

Kat.č.	Název	Specifikace	Strana
D04	Individuální pilíř BioCam, ZrO2		10
D07	Mezičlen mostu, ZrO2		10
D08	Člen nesený implantátem, ZrO2		10
D10	Skenování a design		10
D11	BAR 2 STL - třmen nesený 2 implantáty	Ceka Preci-Horix	10
D12	BAR 3 STL - třmen nesený 3 implantáty	Ceka Preci-Horix	10
D13	BAR 4 STL - třmen nesený 4 a více implantáty	Ceka Preci-Horix	10
D14	BAR 2 PRECISION - třmen nesený 2 implantáty	Ceka Preci-Horix	10
D15	BAR 3 PRECISION - třmen nesený 3 implantáty	Ceka Preci-Horix	10
D16	BAR 4 PRECISION - třmen nesený 4 a více implantáty	Ceka Preci-Horix	10

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

CENY – Všechny výše uvedené ceny zahrnují náklady za dopravu, poštovné nebo balné.

OBJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLU – Materiál je možné objednávat telefonicky na čísle +420 224 315 663, faxem na čísle +420 224 319 716, poštou na adrese LASAK dental s.r.o., Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9 nebo e-mailem na adrese objednavky@lasak.cz. Každá objednávka musí obsahovat následující informace: datum objednávky, úplné jméno odběratele, IČO, dodací adresu odběratele, kontaktní osobu a její telefonní číslo, úplnou specifikaci objednávaného materiálu (katalogové číslo a název materiálu) a požadovaný termín dodání. Výše uvedenými způsoby přijatá a potvrzená objednávka je považována za oboustranně závaznou.

TERMÍNY DODÁVEK – Datum dodání závisí na zvoleném způsobu dopravy, který je nutno dohodnout při objednávce. Standardní způsob dodání je do dvou pracov-

ních dnů při objednávce do 12:00 hod. Na území Prahy je možno objednat expresní dodávku kurýrními službami do 3 hodin od objednání. Při nedostupnosti konkrétního produktu na hlavním skladu může být dodací lhůta i několik týdnů. Dodací podmínky BioCam® frézovaných mostů a pilířů se řídí zvláštními podmínkami uvedenými v ceníku nebo letáku BioCam®.

POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK – Zásilky jsou pojištěny dodavatelem pro případ ztráty nebo poškození v průběhu přepravy při využití doporučeného způsobu dopravy. V případě jiného způsobu dopravy se pojistné účtuje zvlášť. Přechod rizika se uskutečňuje v okamžiku převzetí zásilky odběratelem.

ZPŮSOB BALENÍ MATERIÁLU – Materiál je balen do uzavřených obalů s identifikačními štítky a po expedici ze skladu je opatřen přepravním obalem zajišťujícím bezpečnou dodávku odběrateli. Materiál je dodáván v nesterilním balení. Zákazník je povinen si zásilku přezkontrolovat a v přípa-

dě porušení nebo nekompletnosti reklamovat u dodavatele.

VÝMĚNA, VRÁCENÍ MATERIÁLU – Rozhodne-li se odběratel objednaný a řádně dodaný materiál vyměnit nebo vrátit, může tak učinit, a to výhradně v neporušeném obalu do 7 dnů ode dne dodání. Vzniklé dodatečné přepravní náklady hradí odběratel.

PLATEBNÍ PODMÍNKY – Výše uvedené ceny se rozumí netto na účtu dodavatele. Za standardní platební podmínku se považuje dodání materiálu na fakturu se splatností 14 dnů ode dne vystavení, přičemž datum vystavení faktury je i datem expedice. V případě prodlení s úhradou faktury si dodavatel vyhrazuje právo změnit platební podmínku na dodávky realizované na dobírku, eventuálně na platbu předem. V případě prodlení s úhradou faktury účtujeme úrok z prodlení 0,1 % za den.

PLATNOST CENÍKU – od 1. 1. 2025.

KONTAKT A OBJEDNÁVKY

Telefon: +420 224 315 663, fax: +420 224 319 716, e-mail: objednavky@lasak.cz.
Poštovní adresa: LASAK dental s.r.o., Českobrodská 1047/46, Hloubětín, 190 00 Praha 9.

Výrobce implantačního systému IMPLADENT® je společnost LASAK s.r.o.
Společnost LASAK dental s.r.o. je distributorem protetických komponent IMPLADENT®.



IFU-000072 Rev.[01] 2025-01-01